


# LIGASANO®

Art.-Nr. 15090-012

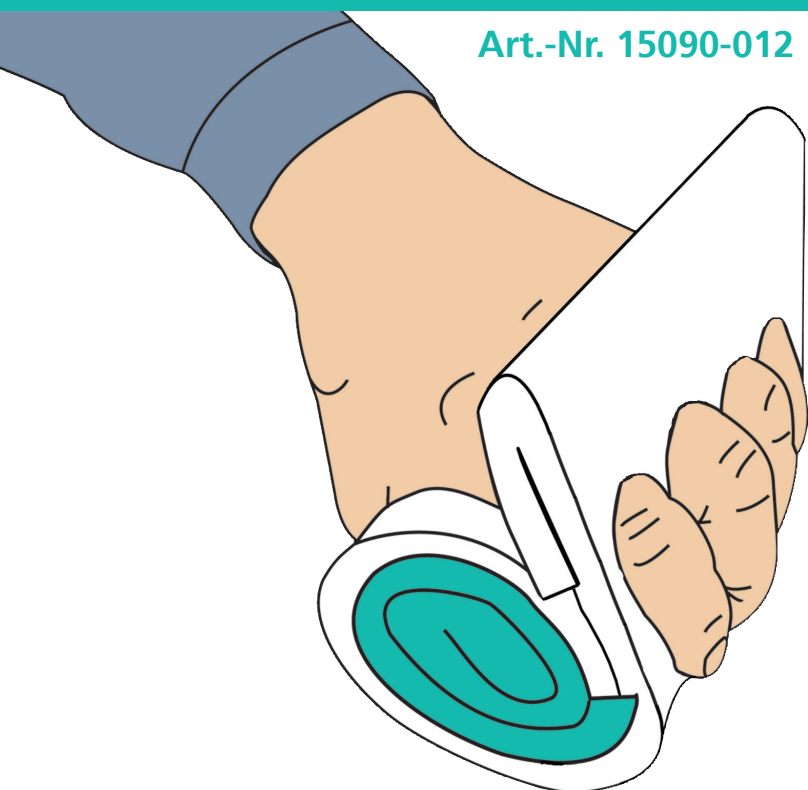


## Innenhand-Verband aus LIGASANO® weiß

Palm Dressing made of LIGASANO® white

Stabilisateur de main pansement avec LIGASANO® blanc

Posizionatore per mani con LIGASANO® bianco

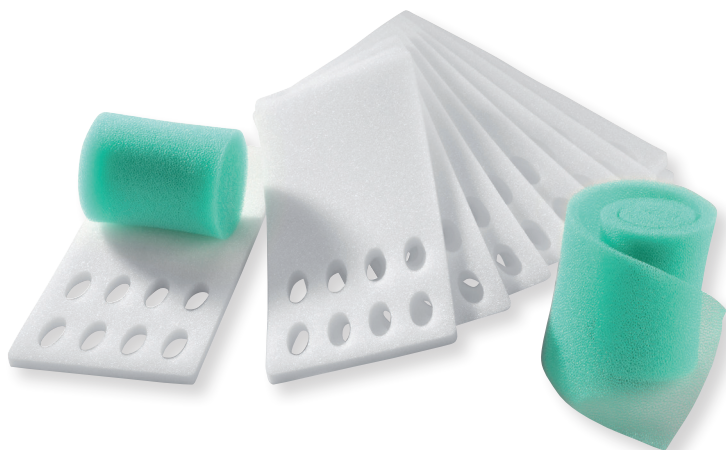

### Packungsinhalt / Content / Contenu / Contenuto:


10 Stück Innenhand-Verband aus LIGASANO® weiß, 29 x 12 x 1 cm  
10 pcs. palm dressing made of LIGASANO® white, 29 x 12 x 1 cm  
10 unités stabilisateur pour les mains LIGASANO® blanc, 29 x 12 x 1 cm  
10 pezzi posizionatore per mani LIGASANO® bianco, 29 x 12 x 1 cm

2 Stück Spiralrollen aus LIGASANO® grün, Breite 10 cm, Ø 8 cm  
2 pcs. spiral rolls made of LIGASANO® green, width 10 cm, Ø 8 cm  
2 unités rouleaux de LIGASANO® vert, 10 cm de large, Ø 8 cm  
2 pezzi rotolo de LIGASANO® verde, 10 cm largo, Ø 8 cm

**LIGASANO®**  
*wirkt einfach*

# LIGASANO®

1

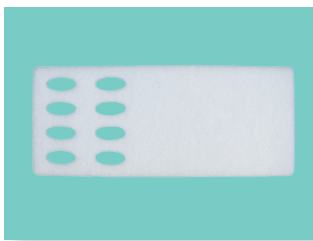

2



3



4



5



6



7



8



# LIGASANO®

**Bild 1:**

Der Innenhandverband aus LIGASANO® weiß hat zwei vorgefertigte Reihen mit je vier Aufnahmen für die Finger.

**Bild 2:**

Durch Abknicken werden die beiden Reihen übereinander gebracht und die Finger durch die beiden Lagen gesteckt.

**Bild 3:**

Bitte beachten: Das kürzere Ende liegt immer in Richtung Handfläche.

**Bild 4:**

Intertrigo, Druckstellen und Verletzungen in den Handinnenflächen und zwischen den Fingern können so behandelt bzw. verhütet werden. Der mechanische Reiz, den LIGASANO® weiß auf die Handinnenflächen ausübt, wirkt lokal durchblutungsfördernd, abgestorbene Hautzellen lösen sich (Peeling).

**Bild 5:**

Zusätzlich kann eine Spiralrolle aus LIGASANO® grün eingelegt werden, um einen Trainingseffekt zu erreichen oder um die Hand durch dauernden leichten Gegendruck von innen sogar wieder ein Stück zu öffnen. Wegen der besonderen Materialeigenschaften wird dabei einem Wärme- oder Feuchtestau vorgebeugt. Falls durch den bloßen Kontakt mit der Handinnenfläche die Gefahr besteht, dass eine Spastik ausgelöst wird, ist diese Anwendung kontraindiziert.

**Bild 6:**

Die Spiralrolle aus LIGASANO® grün kann sowohl im Durchmesser als auch in der Festigkeit verändert werden. Wenn die Rolle geöffnet und enger wieder zusammengerollt wird, entsteht ein geringerer Durchmesser mit höherer Festigkeit. Wird ein kleinerer Durchmesser ohne höhere Festigkeit gewünscht, kann ein Teil der Außenbahn gekürzt werden.

**Bild 7:**

Auch bei ganz geschlossenen Händen lässt sich der LIGASANO® Innenhand-Verband einfach anwenden und anpassen, mit den bekannten Vorzügen der Vermeidung von Haut-Haut-Kontakt.

**Bild 8:**

Eine wirksame Fixierung kann mit LIGAMED®/x erfolgen.

**Der Innenhand-Verband aus LIGASANO® weiß ist ein Einwegprodukt, das nach einigen Tagen seine Eigenschaften verliert und dann als Hausmüll (außer infizierte Verbände) entsorgt wird. Die Spiralrollen aus LIGASANO® grün können längere Zeit verwendet werden (z.B. als Handtrainer), sind waschbar bis zu 95°C und mit Wasserdampf sterilisierbar (bei Bedarf bitte gesonderte Informationsbroschüre anfordern).**

**Image 1:**

The palm-dressing made of LIGASANO® white has two rows each with four notches for the fingers.

**Image 2:**

By bending down you can bring the two rows one upon the other. Now stick the fingers through the both layers.

**Image 3:**

Please note: the shorter end always has to lie towards the palm.

**Image 4:**

By this you can treat or prevent intertrigo, dents and hurts of the palms and between the fingers. The mechanical stimulus, which effects the LIGASANO® white to the palm, is favouring the local blood flow; non vital dermal cells peel away.

**Image 5:**

Additionally you can insert a spiral roll of LIGASANO® green to get a workout effect or even to open it a little bit once again by permanent light counter pressure. Due to the special properties of the material you can prevent accumulation of heat or moisture. If only the contact to the skin of the palm may cause spasticity, this application is contraindicated.

**Image 6:**

You can adapt the diameter as well as the strength of the LIGASANO® green spiral roll. If you open the roll and coil it up narrower, a smaller diameter with higher strength results. If a smaller diameter without higher strength is favoured, you can cut a part of the outer coat.

**Image 7:**

Also in the case of completely closed hands you can utilize and adapt the LIGASANO® palm dressing easily, with all the known advantages in avoiding the skin-to-skin contact.

**Image 8:**

An efficient fixation can be made with LIGAMED®/x.

**The palm-dressing made of LIGASANO® white is a disposable product, that loses its properties after a few days. Except for infected dressings, you can dispose it with the household waste. The spiral rolls made of LIGASANO® green are utilizable for a longer time (e.g. for a workout of the hands), are washable up to 95°C and sterilizable with steam (if required please ask for our special information brochure).**

**Image 1:**

Le stabilisateur de main LIGASANO® blanc a deux rangées préformées de 4 trous pour les doigts.

**Image 2:**

Plier le LIGASANO® blanc de manière à superposer les deux rangées préformées afin de pouvoir passer les doigts au travers des deux épaisseurs.

**Image 3:**

Veillez noter: l'extrémité la plus courte doit toujours être en contact avec la paume de la main.

**Image 4:**

Intertrigo, points de pression, plaies sur la paume et entre les doigts peuvent être ainsi soignés ou évités. La stimulation mécanique exercée par le LIGASANO® blanc sur la surface de la paume favorise la vascularisation au niveau local et le détachement des cellules mortes (peeling).

**Image 5:**

Il est possible d'insérer un rouleau de LIGASANO® vert à l'intérieur de la main afin de créer un effet training ou pour obtenir une ouverture partielle grâce à la contre pression permanente. En raison des propriétés particulières du matériel; accumulation de la chaleur et d'humidité sont ainsi évitées. Si par le simple contact avec la paume de la main il ya un risque que le spasme est déclenché, cette application est contre-indiqué.

**Image 6:**

Le rouleau de LIGASANO® vert peut être modifié aussi bien dans son diamètre que dans sa force élastique. Si le rouleau est déroulé et roulé plus étroitement son diamètre sera inférieur et sa force élastique augmentée. Si vous désirez un diamètre plus petit sans augmenter la force élastique il sera suffisant simplement de couper dans la longueur de la bande.

**Image 7:**

Le stabilisateur de mains LIGASANO® est facilement utilisable et adaptable, même en présence de mains complètement fermées avec tous les avantages connus en évitant le contact peau contre peau.

**Image 8:**

Une fixation efficace peut être obtenue avec le LIGAMED®/x.

**La stabilisateur pour les mains LIGASANO® blanc est un produit à usage unique qui perd ses propriétés après quelques jours d'utilisation et doit de ce fait être remplacé. Le produit déjà utilisé peut être éliminé comme un simple déchet domestique (excepté les pansements infectés). Les rouleaux de LIGASANO® vert sont utilisable pendant un temps plus long (par ex. pour l'entraînement de main), ils sont lavable jusqu'à 95°C et stérilisable à la vapeur d'eau (demandez si nécessaire tout complément d'information).**

**Immagine 1:**

Il posizionatore per mani LIGASANO® bianco ha due file di quattro fori ciascuna per l'inserimento delle dita.

**Immagine 2:**

Piegare LIGASANO® bianco facendo sovrapporre le due file di fori, per poter inserire dentro le dita.

**Immagine 3:**

Si prega di far attenzione che l'estremità più corta, ottenuta dopo aver fatto sovrapporre le due file di fori, sia sempre rivolta verso il palmo della mano.

**Immagine 4:**

Intertrigo, punti di pressione e ferite nel palmo della mano e tra le dita possono essere curate o evitate. Lo stimolo meccanico che LIGASANO® bianco esercita sulla superficie del palmo della mano favorisce la circolazione a livello locale ed asporta le cellule morte (peeling).

**Immagine 5:**

In più può essere inserito, all'interno della mano, un rotolo di LIGASANO® verde per ottenere un effetto training o per ottenere una parziale apertura della mano grazie alla leggera e continua risposta elastica del materiale. Grazie alle particolari proprietà del materiale vengono evitati ristagni di calore e di umidità.

**Immagine 6:**

Il rotolo di LIGASANO® verde può essere adattato sia nel diametro che nella sua forza elastica. Se il rotolo viene srotolato e riavvolto più stretto il suo diametro sarà inferiore e la forza elastica del materiale sarà maggiore. Se si desidera ridurre il diametro senza aumentare la forza elastica, sarà sufficiente tagliare un pezzo del rotolo.

**Immagine 7:**

Il posizionatore per mani LIGASANO® è di facile utilizzo ed adattabilità, anche per mani completamente chiuse, con i noti vantaggi ottenuti evitando il contatto pelle a pelle.

**Immagine 8:**

Un fissaggio efficace può essere ottenuto con il LIGAMED®/x.

**Il posizionatore per mani LIGASANO® bianco è un prodotto monouso che dopo alcuni giorni perde le sue proprietà e deve quindi essere sostituito. Il prodotto già utilizzato può essere smaltito come rifiuto domestico (se non infetto). Il rotolo di LIGASANO® verde può essere utilizzato per più tempo (per es. come training per la mano), è lavabile fino a 95°C ed è sterilizzabile a vapore (se necessario chiedere informazioni aggiuntive).**

# LIGASANO®

## LIGASANO® Innenhandverband Kombipackung

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit / Sales Unit / Unité de Transport / Contenuo
15090-012	17251019	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 29 x 12 x 1 cm LIGASANO® weiß 2 Stck./pcs./pièces/pezzi Spiralrollen LIGASANO® grün unsteril/unsterile/non stérile

## LIGASANO® Innenhandverband Nachkaufpackung

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit / Sales Unit / Unité de Transport / Contenuo
15091-010	17251025	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 29 x 12 x 1 cm LIGASANO® weiß unsteril/unsterile/non stérile

## LIGASANO® Finger- und Zehenverband

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit / Sales Unit / Unité de Transport / Contenuo
15215-001	17251189	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 200 x 14 x 0,5 cm LIGASANO® weiß unsteril/unsterile/non stérile mit Kleberand, für ca. 40-50 Zehensschläuche

## LIGASANO® weiß / white / blanc / bianco

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit / Sales Unit / Unité de Transport / Contenuo
15341-010	17251249	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 5 x 5 x 1 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15342-010	17251261	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 5 x 5 x 2 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15346-010	17251290	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 10 x 10 x 1 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15347-010	17251321	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 10 x 10 x 2 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15350-015	17251338	15 Stck./pcs./pièces/pezzi 15 x 10 x 0,5 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15351-010	17251350	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 15 x 10 x 1 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15356-010	17251456	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 15 x 10 x 2 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15352-010	17251404	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 24 x 16 x 1 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15357-005	17251462	5 Stck./pcs./pièces/pezzi 24 x 16 x 2 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>

15370-010	17251485	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 300 x 2,5 x 0,4 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15371-007	17251516	7 Stck./pcs./pièces/pezzi 100 x 1,5 x 0,4 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15372-010	17251545	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 50 x 1,5 x 0,4 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15375-010	17251568	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 6 x 2,5 x 0,4 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15378-030	17251580	30 Stck./pcs./pièces/pezzi 30 x 5,0 x 0,3 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
15379-030	17251597	30 Stck./pcs./pièces/pezzi 50 x 5,0 x 0,3 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>

15385-010	17251628	10 Stck./pcs./pièces/pezzi Ø 5 cm x 1 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
-----------	----------	--

12001-007	17250646	7 Stck./pcs./pièces/pezzi 59 x 49 x 2 cm unsteril/unsterile/non stérile
12002-014	17250675	14 Stck./pcs./pièces/pezzi 59 x 49 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile
12003-025	17250698	25 Stck./pcs./pièces/pezzi 59 x 49 x 0,5 cm unsteril/unsterile/non stérile
12006-001	17250712	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 200 x 100 x 2 cm unsteril/unsterile/non stérile
12007-002	17250729	2 Stck./pcs./pièces/pezzi 200 x 100 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile
15152-010	17251077	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 24 x 16 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile
15153-005	17251083	5 Stck./pcs./pièces/pezzi 24 x 16 x 2 cm unsteril/unsterile/non stérile
15158-013	17251108	13 Stck./pcs./pièces/pezzi 15 x 10 x 2 cm unsteril/unsterile/non stérile
15159-026	17251114	26 Stck./pcs./pièces/pezzi 15 x 10 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile

15025-001	17250853	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 200 x 2,5 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile
15225-001	17251203	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 300 x 2,5 x 0,6 cm unsteril/unsterile/non stérile
15050-001	17250882	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 300 x 5 x 0,3 cm unsteril/unsterile/non stérile
15055-001	17250899	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 200 x 5,5 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile
15255-001	17251226	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 300 x 5,5 x 0,6 cm unsteril/unsterile/non stérile
15110-001	17251054	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 200 x 11 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile
15210-001	17251172	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 300 x 11 x 0,6 cm unsteril/unsterile/non stérile

## LIGASANO® grün / green / verde / vert

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit / Sales Unit / Unité de Transport / Contenuo
16814-010	17251841	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 5 x 5 x 2 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
16816-010	17251887	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 15 x 10 x 1 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
16817-010	17251918	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 15 x 10 x 2 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
16820-005	17251930	5 Stck./pcs./pièces/pezzi 24 x 16 x 2 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
16865-010	17251999	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 200 x 2 x 0,6 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>
16812-010	17251829	10 Stck./pcs./pièces/pezzi 30 x 1,5 x 0,6 cm <b>steril/sterile/stérile/sterile</b>

16001-007	17251769	7 Stck./pcs./pièces/pezzi 55 x 45 x 2 cm unsteril/unsterile/non stérile
16006-001	17251781	1 Stck./pcs./pièces/pezzi 190 x 90 x 2 cm unsteril/unsterile/non stérile
16110-001	17251806	1 Stck./pcs./pièce/pezzo 200 x 11 x 1 cm unsteril/unsterile/non stérile
16210-002	17251812	2 Stck./pcs./pièces/pezzi 49 x 49 x 9/1 cm unsteril/unsterile/non stérile

Unser komplettes Produktangebot finden Sie in unserer Preis-/Lieferübersicht.

LIGASANO®  
*wird einfach*